

TUBE

| Malleable Penile Prosthesis |

Улучшенная конструкция
для **максимального эффекта**,
когда важна
уверенность в себе



Promedon
— People + Innovation



МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Передовые исследования и разработки в сочетании с материалами высшего качества обеспечивают устойчивость протеза **TUBE** к сгибанию.


Уникальная конструкция обеспечивает осевую жесткость и эффективность, когда это так необходимо.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Сердечник из серебряной скрученной проволоки обеспечивает осевую жесткость и гибкость изделия.
- ▶ Покрытие серебряного сердечника из политетрафторэтилена – надежность фиксации имплантата.
- ▶ Внешнее покрытие закругленной формы изготовлено из биосовместимого силиконового эластомера.
- ▶ Благодаря отдельным рентгеноконтрастным силиконовым удлинителям в задней части, протез можно сделать нужной длины.

Осевая жесткость полового члена

Удовлетворенность пациента и его партнера непосредственно связана с уровнем осевой жесткости полового члена. Протез **TUBE** соответствует строгим стандартам качества и образцам, что гарантирует высокий уровень осевой жесткости

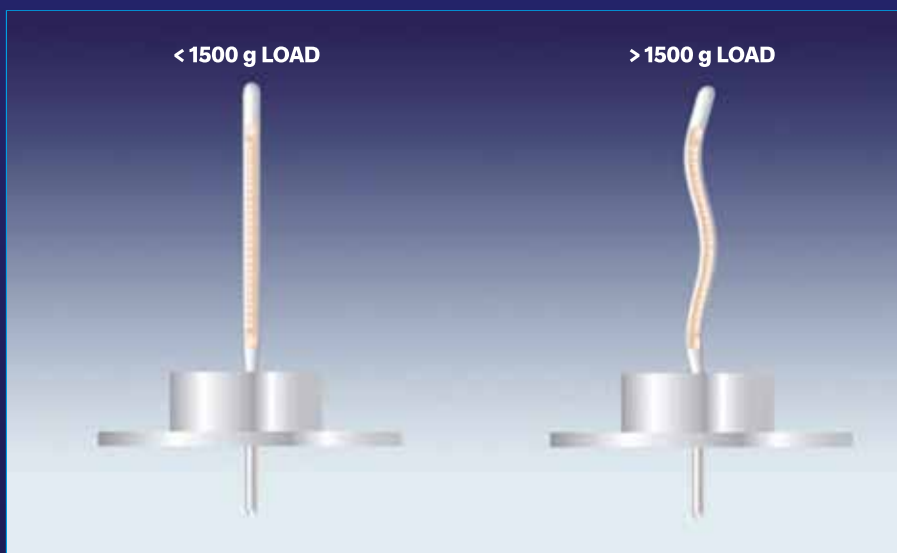

После имплантации протеза полового члена от его осевой жесткости зависит удовлетворенность пациента и его партнера.

Абдулла Аль-Ансари, Раид А. Талиб, Ондер Кангунен, Ахмад Шамсодини – DOI: 10.4081/aiua.2013.3.138

«Целью этого исследования была оценка осевой жесткости и ее связи с удовлетворенностью пациентов и их партнеров».... «Согласно нашим результатам для удовлетворенности пациентов с имплантированными протезами полового члена требуется осевая жесткость почти в 1000 г по цифровому ригидометру изгиба (DIR)».






TUBE

Malleable Penile Prosthesis

ПРЕВОСХОДНАЯ ГИБКОСТЬ

Конструкция из серебра, политетрафторэтилена и силикона придает протезу **TUBE** уникальную гибкость, которая позволяет пациенту располагать имплантат под углом до 130°.

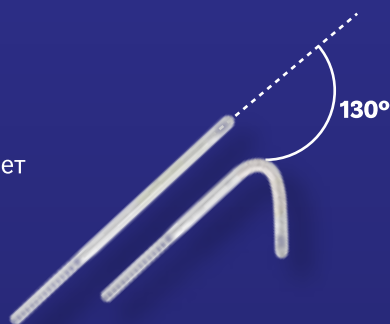

НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ


Технология изготовления гибких протезов полового члена **TUBE** гарантирует нужную твердость каждого сегмента имплантата.

Мягкая дистальная часть минимизирует риск раздражения и эрозии.

Более жесткая проксимальная часть значительно повышает стабильность и фиксацию.

Внешняя поверхность силиконового корпуса предотвращает вращение.

СТЕПЕНИ ТВЕРДОСТИ СИЛИКОНА

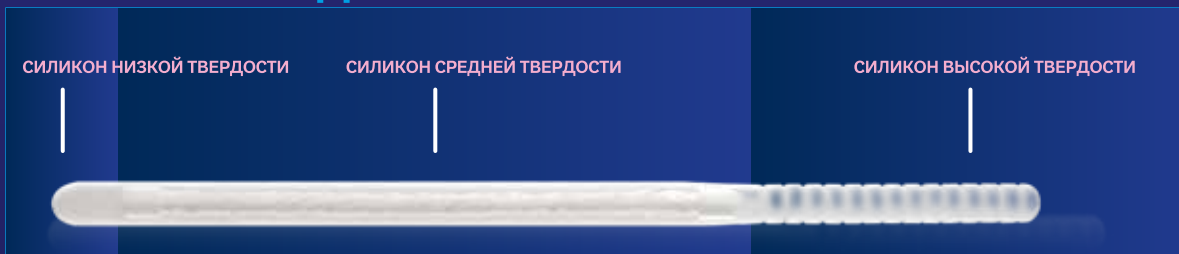

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ДЛИНУ

Для достижения высокой эффективности и долговечности очень важно выбрать правильную длину протеза.

Конструкция проксимальной части позволяет ее укорачивать, чтобы подобрать длину протеза в соответствии с общей длиной тел полового члена.

Необходимо неукоснительно следовать руководству по хирургической методике установки гибкого протеза полового члена **TUBE**, чтобы выбрать правильную длину протеза в каждом конкретном случае.

Рентгеноконтрастные удлинители задней части прикрепляются к проксимальной части имплантата, что позволяет точно подобрать окончательную длину имплантата и придать ему округлую форму для мягкого контакта с проксимальными отделами кавернозных тел.



TUBE

| Malleable Penile Prosthesis |



КОД ПРОДУКТА	A (мм)	B (мм)	C (мм)
T-090	65	135	9
T-100	65	155	10
T-110	70	170	11
T-120	80	180	12
T-120VS	60	155	12
T-130	80	187	13
T-130VS	80	172	13

Каждый набор TUBE содержит:

- 2 полупротеза
- 2 задних части, 10 мм
- 2 задних части, 15 мм

B-10-01 (05) / 10-MAR-2017